


OSD

orthopaedic & spine development

Safe and Innovative Solutions

Neobone Gel™

Innovativo e modellabile sostitutivo
osseo

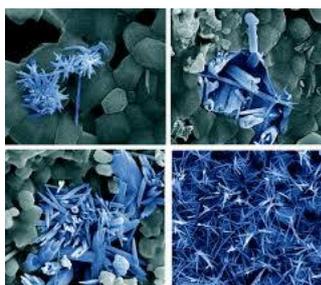

- Riassorbibile
- Mantiene il volume
- Resta in situ
- Superiori caratteristiche di maneggevolezza


Facilmente malleabile per adattarsi ad ogni tipo di imperfezione ossea.

Neobone Gel™ grazie alla composizione chimica ed alla matrice di cui e' formato garantisce un importante vascolarizzazione e di conseguenza un rapido attecchimento osseo.

Codici - Componenti

Neobone Gel™ è venduto in siringa singola sterile. Grazie alle sue proprietà Neobone Gel™ si adatta esattamente al sito di insediamento.

La tecnologia MBCP™ favorisce la rigenerazione ossea di qualità, più di 650 studi pubblicati negli ultimi 30 anni con risultati comparabili a quelli dell'osso autologo.

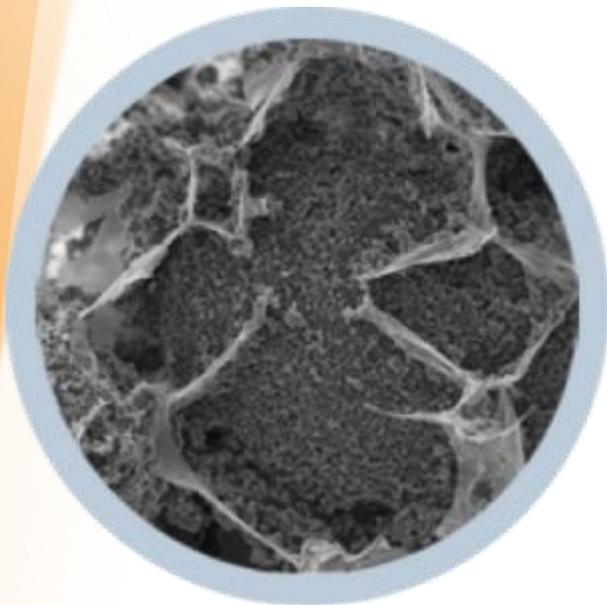

Caratteristiche tecniche

- Bioattivo
- Osteoconduttivo
- Più di 30 anni di follow-up clinico (MBCP™ Tecnologia)
- 100% sintetico : 60% Hydroxyapatite, 40% Tricalcium Phosphate β -TCP e un polimero
- 70% porosità: rete interconnessa di macropori e micropori
- Dimensione dei Macropori : 300 – 600 μ m
- Dimensioni dei Micropori : < 10 μ m

Distribuito da:

Riferimento	Descrizione
INJ-BS-0.5	sostituto osseo iniettabile 0,5ml
INJ-BS-1	sostituto osseo iniettabile 1ml

L'elenco completo dei codici è disponibile su richiesta.

CE
0123

Nota : Leggere attentamente le istruzioni d'uso e l'elenco completo delle precauzioni, dei possibili effetti indesiderati e altre importanti avvertenze cliniche.

Non tutti i prodotti sono registrati/disponibili in ogni parte del territorio, siamo a disposizione per informazioni a riguardo.

MBCP™ è un marchio commerciale di Biomatlante.

Distributore : **Orthopaedic & Spine Development (OSD)**

Technopole Agroparc – BP 11211
84911 Avignon Cedex 9 – France

www.osdevelopment.com

info@osdevelopment.fr

Tél : +33 (0)4 32 74 01 10

Fax : +33 (0)4 90 80 02 39

 **Fabbricante : Biomatlante**

5, rue Edouard Belin – ZA Les Quatre Nations
44360 Vigneux de Bretagne – France
www.biomatlante.com

NEO-BRO-IT201607